

**NAVODILA ZA UPORABO – MEHKA
VRATNA ORTOZA 1100
OSNOVNI UDI-DI 3830078321100VP
IZJAVA EU O SKLADNOSTI-1100/2023**

Pred uporabo natančno preberite navodila, ki so pred vami. Pravilna uporaba je bistvena za ustrezno delovanje izdelka.

Indikacije: lažje poškodbe vratne hrbtenice, bolečine v vratu, degenerativne bolezni, akutni ali kronični cervikalni sindromi, po operacijah, izvini, nategi

Kontraindikacije: /

Opozorilo: Izdelek naj se uporablja pod kontrolo zdravnika ali zdravstvenega delavca. Izdelek ni namenjen nekontrolirani uporabi. Če čutite bolečine, otekanje, spremembe občutka al katerekoli nenavadne reakcije, ko uporabljate ta izdelek, se posvetujete s svojim zdravnikom.

Lastnosti: Izdelana iz pene s povišano trdoto, anatomsko oblikovana, zapenjanje z velcro trakom

Navodila za namestitev - Namestitev lahko izvede le strokovno usposobljena oseba: 1. Ortozo namestite na vrat in zadaj spnite s trakom ježkom – slika 1 in 2

Merjenje in izbira velikosti: Za imobilizacijo je zelo pomembna pravilna izbira velikosti opornice. Pri merjenju pacientovo glavo postavite v nevtralen položaj. Višina: merite od vrha brade do vrha prsnice v ravni liniji. Če pacientova mera pade med dve višini, izberite nižjo velikost. Obseg: merite obseg pacientovega vratu. Če pacientova mera pade med dva obsega, izberite večjo velikost.

ŠT.	VELIKOST	OBSEG	UDI
1101	XS 6	20-26 cm	3830078320000
1102	S 8	26-34 cm	3830078320017
1106	S 10	26-34 cm	3830078320055


1110	S 12	26-34 cm	3830078320093
1103	M 8	34-42 cm	3830078320024
1107	M 10	34-42 cm	3830078320062
1111	M 12	34-42 cm	3830078320109
1104	L 8	42-50 cm	3830078320031
1108	L 10	42-50 cm	3830078320079
1112	L 12	42-50 cm	3830078320116

Uporaba in nega: Ročno pranje v vodi z blagim milom. Dobro sperite. Samo zračno sušenje. Opomba: dobro sperite, nasprotno lahko povzroča draženje kože in uničuje material.

Garancija: Rebole d.o.o., bo v primeru materialne neučinkovitosti popravila ali zamenjala vsak del ortoze v času 6 mesecev od datuma nakupa. Reklamacij zaradi nepravilne uporabe se ne prizna. Za vse izdelke zahtevamo ročno pranje z blagimi detergenti in sušenje na zraku. Izdelki se ne smejo izpostavljati virom toplote.

EU izjava o skladnosti: Izjavljamo, da so vsi medicinski pripomočki proizvedeni v REBOLE d.o.o. izdelani skladno z odločbami pravilnika o medicinskih pripomočkih, vezano na evropsko direktivo (EU) 2017/745 in jih vezano na predhodno označujemo z oznako CE.

O vsakem resnem zapletu, do katerega je prišlo v zvezi s pripomočkom, je potrebno obvestiti proizvajalca in pristojni organ članice, v kateri ima uporabnik/pacient stalno prebivališče.

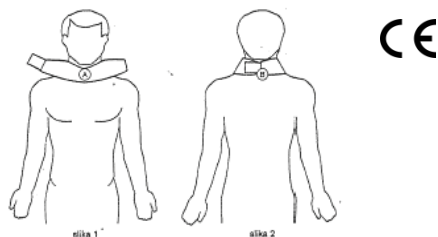

**NAVODILA ZA UPORABO – MEHKA
VRATNA ORTOZA 1100
OSNOVNI UDI-DI 3830078321100VP
IZJAVA EU O SKLADNOSTI-1100/2023**

Pred uporabo natančno preberite navodila, ki so pred vami. Pravilna uporaba je bistvena za ustrezno delovanje izdelka.

Indikacije: lažje poškodbe vratne hrbtenice, bolečine v vratu, degenerativne bolezni, akutni ali kronični cervikalni sindromi, po operacijah, izvini, nategi

Kontraindikacije: /

Opozorilo: Izdelek naj se uporablja pod kontrolo zdravnika ali zdravstvenega delavca. Izdelek ni namenjen nekontrolirani uporabi. Če čutite bolečine, otekanje, spremembe občutka al katerekoli nenavadne reakcije, ko uporabljate ta izdelek, se posvetujete s svojim zdravnikom.

Lastnosti: Izdelana iz pene s povišano trdoto, anatomsko oblikovana, zapenjanje z velcro trakom

Navodila za namestitev - Namestitev lahko izvede le strokovno usposobljena oseba: 1. Ortozo namestite na vrat in zadaj spnite s trakom ježkom – slika 1 in 2

Merjenje in izbira velikosti: Za imobilizacijo je zelo pomembna pravilna izbira velikosti opornice. Pri merjenju pacientovo glavo postavite v nevtralen položaj. Višina: merite od vrha brade do vrha prsnice v ravni liniji. Če pacientova mera pade med dve višini, izberite nižjo velikost. Obseg: merite obseg pacientovega vratu. Če pacientova mera pade med dva obsega, izberite večjo velikost.

ŠT.	VELIKOST	OBSEG	UDI
1101	XS 6	20-26 cm	3830078320000
1102	S 8	26-34 cm	3830078320017
1106	S 10	26-34 cm	3830078320055
1110	S 12	26-34 cm	3830078320093
1103	M 8	34-42 cm	3830078320024

1107	M 10	34-42 cm	3830078320062
1111	M 12	34-42 cm	3830078320109
1104	L 8	42-50 cm	3830078320031
1108	L 10	42-50 cm	3830078320079
1112	L 12	42-50 cm	3830078320116

Uporaba in nega: Ročno pranje v vodi z blagim milom. Dobro sperite. Samo zračno sušenje. Opomba: dobro sperite, nasprotno lahko povzroča draženje kože in uničuje material.

Garancija: Rebole d.o.o., bo v primeru materialne neučinkovitosti popravila ali zamenjala vsak del ortoze v času 6 mesecev od datuma nakupa. Reklamacij zaradi nepravilne uporabe se ne prizna. Za vse izdelke zahtevamo ročno pranje z blagimi detergenti in sušenje na zraku. Izdelki se ne smejo izpostavljati virom toplote.

EU izjava o skladnosti: Izjavljamo, da so vsi medicinski pripomočki proizvedeni v REBOLE d.o.o. izdelani skladno z odločbami pravilnika o medicinskih pripomočkih, vezano na evropsko direktivo (EU) 2017/745 in jih vezano na predhodno označujemo z oznako CE.

O vsakem resnem zapletu, do katerega je prišlo v zvezi s pripomočkom, je potrebno obvestiti proizvajalca in pristojni organ članice, v kateri ima uporabnik/pacient stalno prebivališče.

